

TAPONES PAINLESS PLUG



DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN:

- **Producto:** PAINLESS PLUG® / SNUG PLUG® (en el mercado de EE. UU.).
- Es un tapón de silicona precargado en un "insertador de tapón" hecho de polipropileno y acero inoxidable.
- Componentes del tapón (Fig. A):
 1. **Bulbo:** Previene la expulsión espontánea del tapón.
 2. **Cuerpo:** Conecta el collarín al bulbo y contiene un canal cerrado para la colocación.
 3. **Collarín:** Cubre el orificio del punto lagrimal para evitar la migración hacia el canalículo.



Fig. A

Propósito del dispositivo: Diseñado para ocluir los puntos lagrimales como tratamiento para la sequedad ocular.

INDICACIONES

- Patologías: Sequedad ocular.
- Población: Niños (12 meses o más) y adultos.
- Áreas de contacto: Puntos lagrimales, canalículos, conjuntiva palpebral y párpados.
- Usuarios previstos: Profesionales capacitados y cirujanos oftalmólogos.
- Entorno de uso: Sala de consulta.

CONTRAINDICACIONES

No debe usarse en casos de:

- Impermeabilidad de los conductos lagrimales.
- Anomalías de los párpados con falta de oclusión nocturna.
- Hiperlaxitud conjuntival senil cubriendo el punto lagrimal inferior.
- Prueba de Rosa de Bengala positiva fuera de la fisura palpebral.
- Ruptura del punto lagrimal.

ADVERTENCIAS

- Uso único, no Re esterilizar.
- Verificar integridad del empaque antes de usar.
- No usar si el indicador no es verde o si ha caducado.

PRECAUCIONES

- Almacenar entre 10°C y 30°C, lejos de la luz solar y la humedad.

EFFECTOS ADVERSOS POTENCIALES

- Canaliculitis, extrusión del tapón, granulomas, epífora, ruptura del punto lagrimal, prurito temporal, inflamación, estenosis canalicular, erosión conjuntival, infección, pérdida del tapón, hiperemia conjuntival, irritación, dolor, sensación de cuerpo extraño, incomodidad.

INSTRUCCIONES DE USO

1. No se requiere dilatación previa del punto lagrimal.
 2. Insertar el dispositivo usando el "insertador de tapón" (Fig. D):
- Sujetar el párpado y estabilizarlo horizontalmente.
 - Introducir el tapón hasta que el insertador toque el párpado.

- Presionar las alas del insertador hasta liberar el tapón.
- Mantener presión mientras se retira el insertador.

3. **Retiro:** Usar pinzas de punta roma para extraer suavemente el tapón.

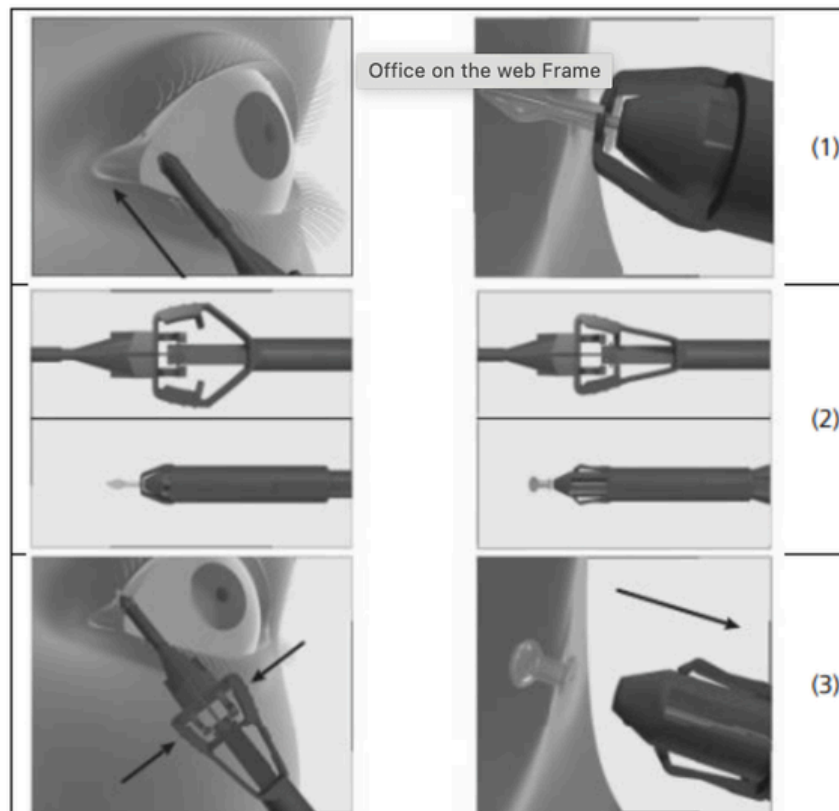


Fig. D

Compatibilidad con otros dispositivos: La parte implantada es compatible con resonancia magnética.

Información al paciente:

- Puede haber molestias locales durante dos horas.
- No frotar el ojo durante el tratamiento.
- Una tarjeta de implante está incluida para registro y trazabilidad.

Eliminación de residuos:

- Partes del dispositivo pueden presentar riesgos (punción, infección, riesgo microbiano).
- Desechar en residuos hospitalarios si está contaminado o en reciclaje doméstico si no.