
CUCHILLETES KAI MEDICAL

Instrucciones de uso



1. Descripción del instrumento

El dispositivo es un microbisturí oftálmico, que consta de una hoja (A) de acero inoxidable, principalmente con forma sagital o redonda, con un filo cortante y un mango de plástico (B), que se coloca en un estuche (C). Disponibles en formato recto y angulado, según la fijación de la hoja al mango. En total hay unas 80 variantes de cuchillas.

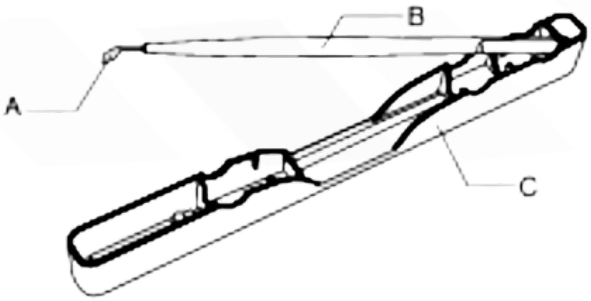


2. Instrucciones de uso

El fin previsto y el beneficio clínico de este microbisturí oftálmico estéril y desechable, es la incisión o separación del tejido ocular para el tratamiento de enfermedades oculares.

- Para uso exclusivo de profesionales sanitarios.
- Para incisión o separación del tejido ocular.

Para abrir el microbisturí oftálmico saque el mango (2) del estuche. Para guardarlo, ponga la parte posterior del mango en el estuche con la punta de la cuchilla mirando hacia abajo (1 y 3) y después guarde el mango dentro del estuche (4).

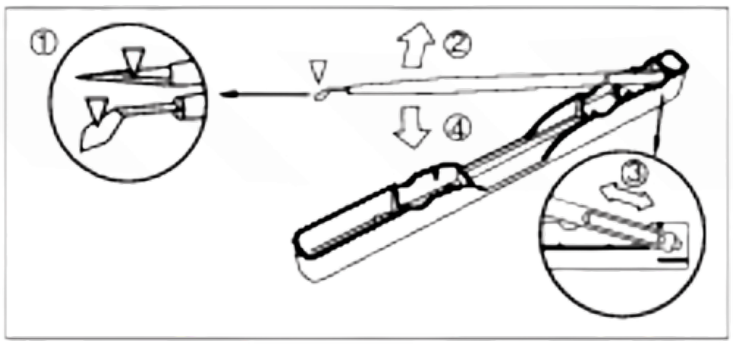

- Asegúrese de que la punta de la cuchilla esté en la posición correcta al sacarla de la bandeja y al guardarla.
- Después de utilizar el microbisturí oftálmico, deséchelo de forma adecuada con los desechos sanitarios para evitar infecciones.

3. Contraindicaciones

- No utilice el instrumento en pacientes hipersensibles o alérgicos.
- No utilice el microbisturí oftálmico si éste presenta algún deterioro o cualquier otra anomalía.

4. Advertencias

- No reutilice este instrumento, ya que puede causar infecciones al paciente.
- Maneje el microbisturí oftálmico con cuidado para evitar lesionarse al tocar el borde de la cuchilla.
- Si el borde de la cuchilla entra en contacto con cualquier otro objeto, deseche el instrumento y utilice uno nuevo.
- Cualquier incidente grave relacionado con el producto deberá comunicarse al fabricante y a la autoridad competente.